

# medel®

## DISPLAY TOP

### MISURATORE DI PRESSIONE



Ampio display a cristalli liquidi



È consigliabile provare la pressione almeno 2-3 volte con intervalli di 1 minuto tra una misurazione e l'altra e infine farne una media per determinare dei valori più attendibili. Medel DISPLAY TOP, grazie al suo sistema T3 è in grado di rilevare direttamente la media delle ultime 3 misurazioni



Il simbolo del cuore viene visualizzato sul display se, durante la misurazione, viene rilevata un'irregolarità nei battiti cardiaci



5 anni di garanzia




Accessori  
• Bracciale standard circonferenza 22-32 cm • Pratica borsina per il trasporto e la conservazione



# medel®

## DISPLAY TOP

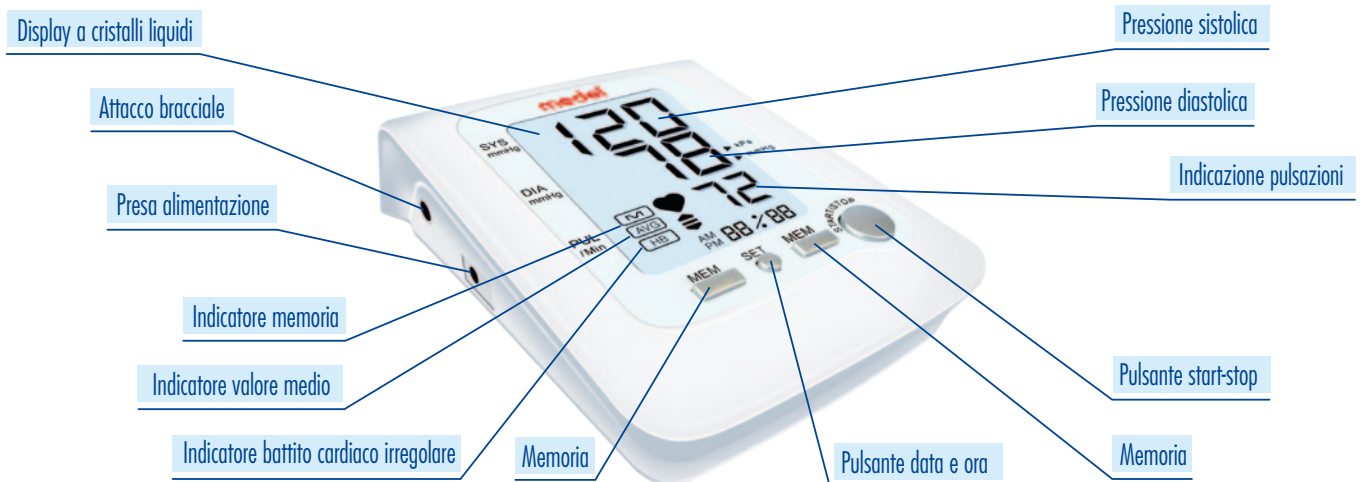

Specifiche Tecniche	DISPLAY TOP
Metodo misurazione	Oscillometrico
Precisione misura	Pressione +/- 3 mmHg battiti +/- 5%
Range di misurazione	Pressione da 0 a 299 mmHg; pulsazioni 40-200 battiti/min
Alimentazione Batterie	4 alcaline AA MAXELL
Memoria misurazioni	90
Numero utenti	2
Tripla Visualizzazione (Sist/Diast/Puls)	✓
Indicatore Data/Ora	✓
Indicatore Battito Cardiaco Irregolare (Aritmia-IHB)	✓
Funzione T3 (media ultime tre misurazione in 15 min)	✓
Dimensioni LCD (bxh)	5,8 x 8,09 cm
Tipo bracciale	Morbido, non preformato
Bracciale STD in dotazione	22 - 32 cm

COD. 92586 Medel DISPLAY TOP

CE 0123



[www.medel.it](http://www.medel.it)